

ЕЛЕКТРИЧЕСКА НАМЕТКА

Beurer CC 50



Кратко ръководство на потребителя

1. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА

- 1 бр. електрическа наметка/термо завивка Beurer CC 50
- 1бр. контролер за управление на уреда
- 1 бр. инструкции за употреба

2. ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ И ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди употреба прочетете тези инструкции внимателно – в противен случай може да пострадате в следствие на неправилна употреба на този уред (токов удар, изгаряния). Ако дадете този уред на някой друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Този уред не бива да се използва от хора с намалена чувствителност към топлина – диабетици, хора с кожни промени, свързани със заболяване, хора с белези на кожата в зоната на третиране и хора, които са приели алкохол или болкоуспокоителни.
- Този уред не бива да се използва от деца между 0 – 3 години, поради по-ниската им чувствителност към топлина.
- Уредът може да се използва от деца над 8-годишна възраст и хора с намалени физически, сензорни или умствени способности само под надзор и след инструктаж за опасностите от употреба.
- Този уред не може да се използва от малки деца (3-8 години), освен ако настройките му не са зададени от родител или отговорен

възрастен и на детето са дадени адекватни инструкции как да използва уреда безопасно.

- Уредът не е играчка – дръжте го далеч от деца.
- Уредът не бива да се използва или да се почиства от деца, ако не са в присъствието на възрастен.
- Този уред не е предназначен за употреба в болници.
- Не използвайте уреда сгънат или прегънат.
- Не използвайте уреда, ако е мокър.
- Този уред може да се използва само заедно с посочения на етикета контролер.
- Не използвайте този уред върху животни!
- Не слагайте игли и други остри предмети в уреда и не го използвайте във влажни помещения.
- Електрическите и магнитни полета, излъчвани от този уред могат да повлияят на функцията на пейсмейкърите. Независимо от това те са в допустимите граници: сила на електрическо поле: макс. 5000 V/m, сила на магнитното поле: макс. 80 A/m, плътност на магнитния поток: макс. 0,1 милитесла.
- Моля консултирайте се с лекар и с производителя на вашия пейсмейкър преди да използвате този уред.
- Пазете кабела от горещи повърхности, остри предмети, нараняване, прегъване и усукване.
- Проверявайте уреда редовно за следи от повреда. Ако откриете такива не го включвайте преди оторизиран техник не го прегледа и поправи.
- Ако хранящият кабел е повреден, трябва да се смени от оторизиран техник. Ако не може да се смени, целият уред трябва да бъде изхвърлен.
- Когато завивката е включена не бива:
 - Да поставяте предмети върху нея;
 - Да поставяте други източници на топлина върху нея (например бутилки с топла вода, други отоплителни завивки и тн.)
- Електронните компоненти в контролера се загряват, когато уреда се използва. Поради тази причина контролерът никога не трябва да бъде покриван с нищо или да бъде поставян върху нагревателната завивка, когато се използва.
- Уредът е предназначен за употреба само върху хора. Той не е заместител на лекарска помощ.
- Уредът е само за лична употреба и не е предназначен за медицински или търговски цели.


- В никакъв случай не отваряйте или ремонтирате уреда сами, тъй като перфектната му работа вече не може да бъде гарантирана. Всеки опит за самостоятелна поправка прави гаранцията невалидна.
- Този уред може да се използва като електрическа наметка или като термо завивка.
- Термо завивката е оформена така, че да може да я носите като наметало. Тъмната част на завивката трябва да е обърната към вас. Може да затворите завивката чрез тик так копчетата отпред и да я оформите като наметка допълнително чрез тик так копчетата в зоната на ръцете.



	Не бодете и пробождайте уреда.		Не избелвайте.
	Не сгъвайте и прегъвайте уреда.		Не центрофугирайте.
	Да не се използва от деца под 3-годишна възраст.		Не носете на химическо чистене.
	Текстилът, използван за това устройство, отговаря на изискванията на Oeko-Tex Standard 100.		Не гладете.
	Перете на програма за деликатни тъкани на 30°C.		

3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА


1. Щепсел
2. Кабел
3. Контролер
4. Светлинен индикатор
5. Бутон за ВКЛ/ИЗКЛ и за настройка на температура
6. Връзка за захранване

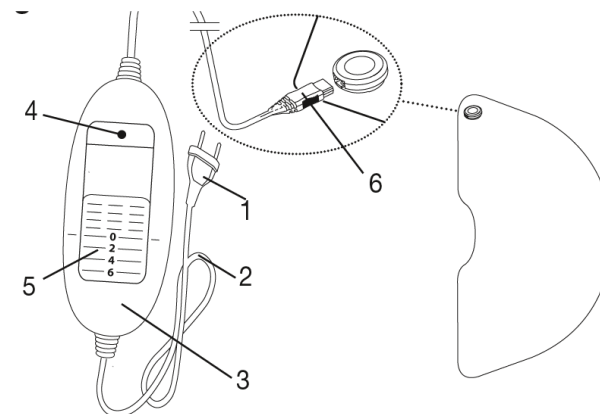

4. УПОТРЕБА

ВАЖНО: Този уред има защита срещу прегряване и в случай на прекомерно повишение на температурата по време на работа той се изключва автоматично. Имайте предвид, че от съображения за безопасност уредът вече не може да работи след включване на автоматичната защита и трябва да потърсите оторизиран техник. Не свързвайте дефектиралата термо завивка към друг контролер от същия тип, тъй като това ще задейства перманентно изключване чрез системата за сигурност на контролера.

- Махнете опаковката на уреда и проверете дали няма следи за повреда върху него, контролера или кабела.
- Първо свържете контролера към термо завивката чрез връзката за захранване (6).
- Сложете щепсела в електрически контакт.
- За да включите уреда плъзнете бутона за ВКЛ/ИЗКЛ и за настройка на температура към позиция 1, 2, 3, 4, 5 или 6. При включване светлинният индикатор (4) светва.
- Температурните нива са 6: Ниво 0= ИЗКЛ; Ниво 1= минимална температура; Настройка 2-5 = индивидуална настройка на температура; Ниво 6=максимална температура.
- За да загрее термо завивката най-бързо, включете температурата на Ниво 6.

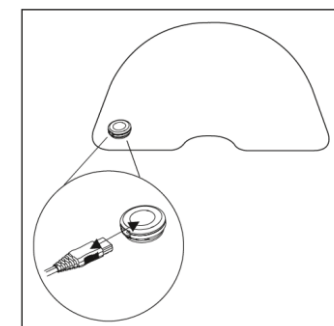

- **ВАЖНО:** Ако използвате уреда за няколко часа препоръчваме да изберете най-ниската степен на затопляне, за да избегнете претопляне и изгаряне.
- Завивката има функция за автоматично изключване. Тя се изключва след 3 часа на работа. Термо завивката вече не се затопля и индикаторът премигва. За да включите завивката отново след това, бутон ВКЛ/ИЗКЛ (5) трябва да бъде на позиция „0“. След 5 секунди може да включите уреда отново.
- За да изключите уреда плъзнете бутон ВКЛ/ИЗКЛ (5) до позиция „0“.
- Ако не използвате уреда винаги го изключвайте от бутон (5), вадете захранващия кабел от него и изваждайте щепсела на кабела от контакта.

5. ПОЧИСТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ

- Изключете уреда преди почистване, вадете захранващия кабел от уреда и от контакта.
- **ВАЖНО:** Контролерът никога не трябва да се мокри. Почиствайте го със суха кърпа. При необходимост може да използвате леко навлажнена кърпа, за да го почистите, но внимавайте да не го намокрите.
- **ВАЖНО:** Не прегъвайте, центрофугирайте, давайте на химическо или гладете термо завивката.
- Може да перете завивката в пералня на програма за деликатни тъкани (например програма за вълна, на 30°C) с прах за пране за деликатни тъкани.
- Имайте предвид, че прането не е препоръчително и оказва негативно влияние върху работата на завивката. Затова тя не бива да се пере повече от 5 пъти през целия си период на употреба.
- Веднага след изпиране изпънете завивката, така че да приеме оригиналните си форми и я оставете да се изсуши върху равна повърхност. Не я простирайте с щипки или други помощни средства, които може да я прегънат или повредят.
- Не използвайте завивката преди да е напълно изсъхнала. Никога не я свързвайте към контролера, кабела и ел. мрежа преди да сте сигурни, че е напълно суха.
- Преди да приберете уреда го оставете да изстине напълно.
- Извадете захранващия кабел от уреда преди да го приберете.
- Не поставяйте тежки предмети върху уреда. Препоръчваме да го съхранявате в оригиналната му опаковка.

- **ВАЖНО:** Никога не включвайте завивката, за да изсъхне по-бързо след пране – риск от токов удар!
- Ако няма да използвате завивката дълго време, препоръчваме да я съхранявате в оригиналната ѝ опаковка. Извадете кабелът от нея и от контролера.
- Никога не поставяйте тежки предмети върху нея, когато сте я прибрали.
- Преди да сгънете завивката се уверете, че е изстинала.

6. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ



Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Уредът е в съответствие с изискванията на Директива 93/42/ЕИО.



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.